


INSTRUÇÕES DE USO - SACADOR DE IMPLANTE

Método de manuseio do sacador de implantes para a retirada do(s) implante(s):


- * Selecionar o implante a ser removido;
- * Remover todos os componentes protéticos do implante e realizar uma limpeza da cavidade interna;
- * Um desgaste deve ser realizado no interior do implante para ampliar a cavidade e permitir o aprofundamento do sacador no interior do implante. Esse desgaste deve ser feito utilizando brocas de metal duro e haste longa (brocas de videa ou carbide).
- * Introduzir manualmente o sacador no interior do implante até seu travamento no sentido anti-horário, e certificar que o mesmo está paralelo ao eixo do implante, até o fundo.
- * Acoplar uma chave ou torquímetro e realizar movimentos firmes no sentido anti-horário e posicionar o torquímetro promovendo uma pressão apical não permitindo o movimento de alavanca.
- * Continuar com o contra-torque no sentido anti-horário, sempre firme até a ruptura da osseointegração e completa remoção do implante.

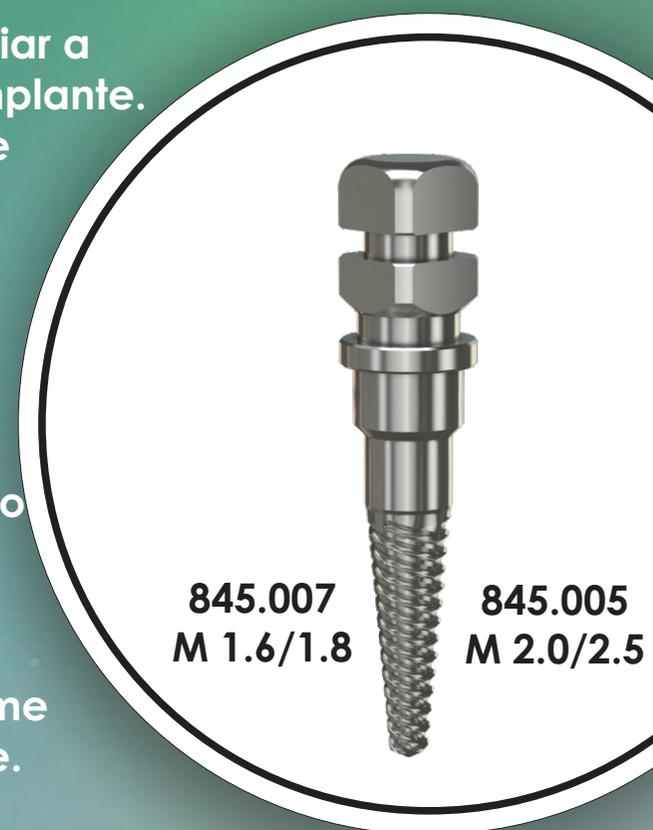

O desgaste interno do implante é importante, pois a não realização do desgaste ou desgaste insuficiente pode provocar a fratura da ponta ativa do sacador de implante.

Dúvidas? Entre em contato conosco!

0800 600 6905

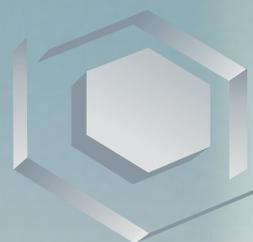

Systemex[®]
IMPLANTES DENTÁRIOS